

Инструкция по эксплуатации ПО “апп321”

Оглавление

<u>1. Инструкция по эксплуатации экземпляра ПО апп321 для экспертной проверки</u>	<u>2</u>
<u>1.1. Исходные данные</u>	<u>2</u>
<u>1.2. Авторизация и регистрация</u>	<u>2</u>
<u>2. Эксплуатация ПО апп321 и работа пользователей</u>	<u>2</u>
<u>2.1. Настройка</u>	<u>2</u>
<u>2.2. Запуск</u>	<u>2</u>
<u>2.3. Работа пользователей</u>	<u>3</u>
<u>2.4. Контакты для решения технических вопросов</u>	<u>3</u>

1. Инструкция по эксплуатации экземпляра ПО апп321 для экспертной проверки

1.1. Исходные данные

Экземпляр ПО апп321 для проведения экспертной проверки находится по адресу: <https://lab321.ru/static/files/app321-1.0-SNAPSHOT.zip>.

Настройка и установка согласно документу “Инструкция по установке апп321” ([https://lab321.ru/static/files/Инструкция по установке app321.pdf](https://lab321.ru/static/files/Инструкция_по_установке_app321.pdf)).

Во время установки апп321 в системе были созданы демо-пользователи: Администратор, Сотрудник, Гость.


1.2. Авторизация и регистрация

Экземпляр ПО апп321 поставляется с готовыми демо-пользователями (при условии что добавлена настройка `liquibase.contexts = "demo"`).

Вход в систему осуществляется в браузере по адресу, указанном в “Инструкции по установке апп321” (<http://127.0.0.1:9000>).

Вначале появляется окно авторизации.

Логин/пароль демо-пользователя: `admin/12345`

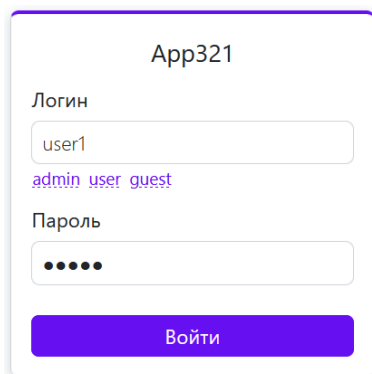

App321

Логин

[admin](#) [user](#) [guest](#)

Пароль

Войти

2. Эксплуатация ПО апп321 и работа пользователей

2.1. Настройка

Для простоты локального запуска можно не настраивать сертификат.

Тогда в файл `conf/application.conf` добавьте следующие строки, снижающие требования к безопасности:

```
auth.authenticator.secureCookie = false
```

```
auth.authenticator.maxAge = 2 days
```

```
auth.authenticator.idleTimeout = null
```

```
auth.authenticator.isSessionCookie = false
```

```
auth.authenticator.useFingerprinting = false
```

2.2. Запуск

Для экспертной проверки приложение может быть запущено в терминале командой

```
./bin/app321 -Dconfig.file=./conf/application.conf
```

```
-Dlogger.file=./conf/logback.xml
```

2.3. Работа пользователей

После выполнения пункта [Авторизация и регистрация](#) пользователь может работать в системе в различных модулях, в том числе создавать, редактировать, удалять записи.

Подробное описание работы с модулями содержится в документе “Функциональное описание и характеристики апп321”

([https://lab321.ru/static/files/Функциональное описание и характеристики апп321.pdf](https://lab321.ru/static/files/Функциональное_описание_и_характеристики_апп321.pdf)).

2.4. Контакты для решения технических вопросов

При наличии вопросов по процессу настройки экземпляра ПО и его функционирования, можно связаться с техническим специалистом по адресу электронной почты **app321@lab321.ru**.